



Ficha Técnica

TOURNISTRIP[®]

Adulto

■ Descripción:

El **Tournistrip[®]** es un torniquete desechable de un solo uso. Diseñado para ayudar a la punción venosa en muestras de sangre y canulación intravenosa.

■ **Dimensiones:** 492.13 mm x 30. mm

■ **Marca Registrada:** TOURNISTRIP

■ **Numero de piezas del fabricante:** 5490LHT236

■ Materiales:

- PP96 Matt White: bizantial mate de 96 micras
- Polipropileno orientado, laminado con un alto adhesivo permanente de fusión en caliente (SP8000)
- HT236 Adhesivo: Adhesivo acrílico a base de agua Tackified, diseñado para dar una alta pegajosidad y adhesión
- Sustratos no polares
- Núcleo de cartón de 50 mm





Ficha Técnica **TOURNISTRIP**[®] Adulto

■ **Embalaje:**

200/1000 unidades en tira individual para ser retirado del carrete a través de la apertura de la caja de auto-dispensación rasgando a través del corte pre-perforado que define el extremo de la tira

- **Reglamentario:** Cumple con las normas 93/42 / EEC como dispositivo médico de Clase I

■ **Marca Registrada:** TOURNISTRIP

Tournistrip se ve y funciona como un torniquete convencional. Su diseño y construcción únicos hacen que el torniquete sea realmente de un solo uso y no pueda reutilizarse. Es fácil de tensar y ajustar, y se puede reposicionar en el mismo paciente hasta 5 veces, la liberación y la extracción se realizan con una sola mano. **Tournistrip** no pellizcará la piel como algunos diseños de "bandas de goma", mejorando así la comodidad del paciente



- Fácil de usar
- Flexible
- Tournistrip es 100% libre de látex.
- Puede ser colocado con una sola mano, minimizando el contacto.
- Se pueden unir dos torniquetes para pacientes grandes o bariátricos
- Comodidad, no pellizcará la piel como algunos diseños de "bandas de goma", mejorando así la comodidad del paciente
- Tournistrip™ ha sido oficialmente certificado en seguridad y cumple con los requisitos sanitarios y medioambientales europeos y FDA
- Tournistrip es el único torniquete médico que se ha probado clínicamente e involucra a dos hospitales de enseñanza de Londres con 226 pacientes y 20 flebotomistas



Ficha Técnica **TOURNISTRIP[®]** Adulto

■ Instrucciones de Uso:

1. Retire la banda adhesiva, donde el Torniquete lo indica
2. Coloque el Torniquete alrededor de la extremidad
3. Realice tensión adecuada usando **Tournistrip** y pegue en el extremo adhesivo
4. Reposicione si es necesario, y repita los pasos 2 y 3, finalizado el procedimiento retire Tournistrip con una mano y deseche en la papelera

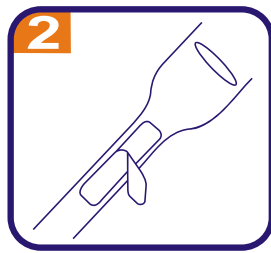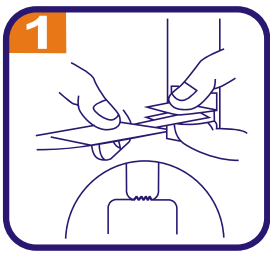

Seguro y cómodo para todos los pacientes



Presentacion 200 unidades pre-cortadas por caja dispensadora

